





L'ÉVACUATEUR ELLIK

a été conçu pour la chirurgie prostatique, ainsi que pour l'irrigation et l'aspiration de tissus, de caillots sanguins ou de calculs vésicaux.

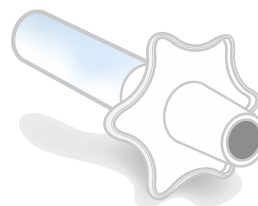

Adaptateur pour Resectoscopes Storz, Wolf

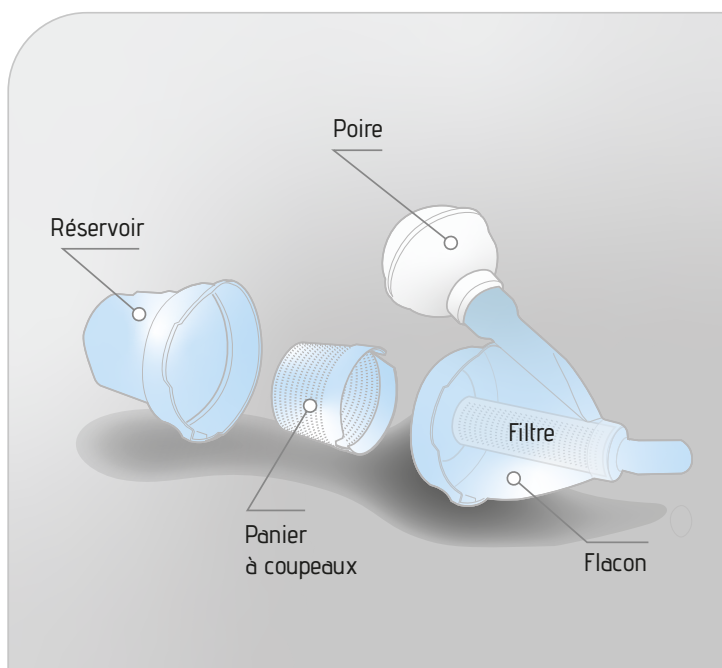

LES INDICATIONS

Le produit consiste en une bouteille en plastique divisée en deux parties afin de permettre l'accès à l'intérieur. À l'intérieur, le conteneur contient une griffe (réservoir) de déchets à éliminer qui peut être transférée dans un conteneur plus grand pour une analyse pathologique. À l'extérieur, le flacon comporte deux rallonges dont l'une est adaptée à l'ampoule et l'autre au raccord de tube (connecteur) et à l'embout cylindrique. Leur système empêche le blocage des fuites et la contamination qui en résulte.

PROCÉDURE D'UTILISATION

L'évacuateur Ellick est relié par un tube se connectant à la chemise du résectoscope et à une poire sans latex. Il est rempli en l'immergeant dans une solution d'irrigation et en comprimant l'ampoule jusqu'à ce que le récipient et l'ampoule soient complètement remplis de la solution d'irrigation et que l'air soit évacué. Il est ensuite lié au résectoscope en retirant l'endoscope avec l'élément de travail. Le bulbe est pressé pour pousser le liquide d'irrigation dans la vessie et les fragments sont aspirés pendant que le bulbe est libéré lentement.

REF 170119

EN - ELLIK Bladder Evacuator Disposable, 280ml
 DE - Einweg Absaugung ELLIK, 280ml
 FR - Evacuateur ELLIK à usage unique, 280ml
 IT - Evacuazione ELLIK monouso, 280ml



Quantité par carton: (6x4)



Quantité par dispenser